

HOCHWERTIGE EINWEG-VEHENSTAUER VERRINGERN DAS RISIKO VON NOSOKOMIALEN INFEKTIONEN

INTENSIVSTATION / ISOLIERSTATION / ONKOLOGIE

Das weiche Vlies bietet besten Komfort für den Patienten und verhindert Klemmen und Quetschen der Haut.

Eine Desinfektion nach jedem Patienten durchzuführen kann bei manchen „einfachen“ Medizinprodukten durchaus Probleme verursachen. Um die geforderten Hygienestandards aber umzusetzen, bedarf es praktikablen Lösungen. Denn im Klinikalltag taucht immer wieder das Problem auf, dass die Mehrweg-Venenstauer nicht oder nicht ausreichend desinfiziert werden.

Das liegt zum einen daran, dass eine zentrale Aufbereitung im Hinblick auf die Produktpreise nicht wirtschaftlich ist. Zum anderen lassen sich Waschmaschinen auf den Stationen nicht integrieren und ein Abwischen mit Desinfektionsmitteln ist aufgrund der Gewebestruktur nicht möglich. Auch Wannen mit Desinfektionsmitteln sollen auf den Stationen nach Möglichkeit vermieden werden. Fraglich bleibt außerdem, ob die Desinfektionsmittel später ausreichend aus dem Gewebe ausgewaschen werden können, um sicher Hautreaktionen zu vermeiden.

Bei dem CBC-VECOS® Einweg-Venenstauer handelt es sich um ein hochwertiges, aber dennoch günstiges Stauband für das einhändige Stauen bei der Blutentnahme. Mit diesem Venenstauer lässt sich Blut besonders schnell abnehmen.

Besonders geeignet für Isolationspatienten

Auch bei Injektionen und Infusionen ist der Venenstauer kaum wegzudenken, denn er ist ein wichtiger Bestandteil jeder Erste-Hilfe-Ausrüstung. Der CBC-VECOS® Einweg-Venenstauer schützt vor der Übertragung von Keimen und vermeidet eine Kreuzkontamination bzw. verringert das Risiko von nosokomialen Infektionen wie MRSA.

Zugleich ist er auch besonders geeignet für Isolationspatienten. Durch die patientenbezogene Zuordnung erübrigen sich auch Probleme hinsichtlich der Entsorgung.

Idealer Begleiter auch für Rettungssanitäter und Notärzte

Er ist die optimale Alternative zum Rasterverschluss. Durch die intuitive Anwendung ist er nicht nur für Klinikpersonal die beste Wahl, sondern auch für den Rettungseinsatz sehr gut geeignet, bei dem schnell einmal ein Teil verloren gehen kann. Das macht den CBC-VECOS® Einweg-Venenstauer auch zum idealen Begleiter für Rettungssanitäter und Notärzte. Durch das weiche Vlies kommt es zu keinem Quetschen, Einschnüren oder Klemmen, daher bietet er den besten Komfort für den Patienten.

Dank Mikrolett lässt sich der CBC-VECOS® Einweg- Venenstauer schnell anlegen, fixieren und rasch lösen.



VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Hygienisch:

- Einmalgebrauch schützt vor Übertragung von Keimen und vermeidet eine Kreuzkontamination
- Verringert das Risiko von nosokomialen Infektionen wie MRSA
- Unterstützt die Hygienestandards für das Personal
- Einwegprodukt: Keine aufwendige Reinigung oder Desinfektion

Sanft

- Sanft zur Haut dank weichem Vlies
- Kein Quetschen, Einschnüren oder Klemmen
- Bester Komfort für den Patienten

Einfach

- Einfaches Anlegen an jeder Stelle, optimal auch mit Handschuhen
- Optimales Fixieren und Lösen durch Mikrokleb
- Für die Pädiatrie: 3 cm breit, 50 cm lang für Kinder
- Für Erwachsene und adipöse Patienten empfehlen wir: 3,5 cm breit, 65 cm lang

Sicher


- Elastik-Band gibt optimale und konstante Staukraft vor
- Ideal auch zur Kompression nach Blutentnahme
- Latex und Silikon-frei
- Frei von Weichmachern (DEHP(Diethylhexylphthalat)-frei)

Für den Rettungsdienst besonders leichtes Gewicht: 2g/Stück


Bestellinformationen

FÜR DIE PÄDIATRIE Ausführung	Stück/VE	Artikel-Nr.
CBC-VECOS® Venenstauer brombeer 30mm // 3cm breit, 50cm lang		
125 Stück in der Spenderbox	125	521001 V 125
1 Nachfüllbeutel à 125 Stück	125	521001 B 125
8 Boxen à 125 Stück in der Spenderbox	1000	521001 V 1000
8 x 1 Nachfüllbeutel à 125 Stück	1000	521001 B 1000
FÜR ERWACHSENE UND ADIPÖSE PATIENTEN Ausführung	Stück/VE	Artikel-Nr.
CBC-VECOS® Venenstauer brombeer 35mm // 3,5cm breit, 65cm lang		
100 Stück in der Spenderbox	100	521002 V 100
1 Nachfüllbeutel à 100 Stück	100	521002 B 100
8 Boxen à 100 Stück in der Spenderbox	800	521002 V 800
8 x 1 Nachfüllbeutel à 100 Stück	800	521002 B 800


Anwendung

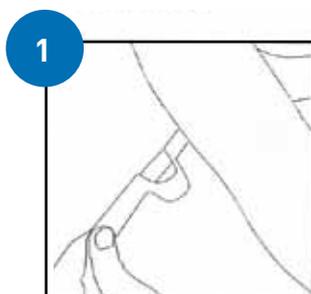

Weiße Seite zum Arm des Patienten.

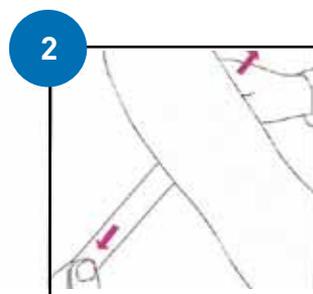

Staukraft durch Ziehen aufbauen.

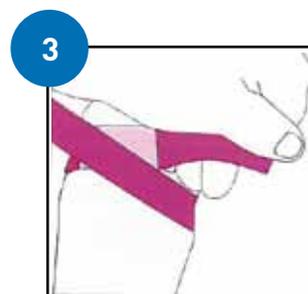

Straff um den Arm legen und im Klebteilbereich fixieren.



Zum Lösen einfach ziehen.



Sehen Sie sich das Video zur Anwendung an!

HINWEIS: CBC-VECOS® ist ein Einwegprodukt und nur zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Nach dem Gebrauch darf es nicht wiederverwendet und sollte vorschriftsgemäß entsorgt werden.